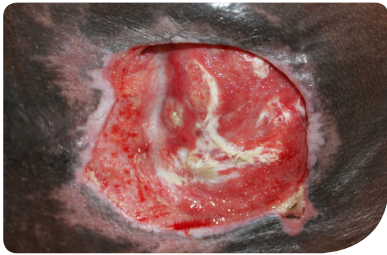

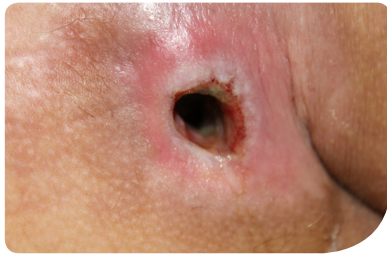




Esta guía puede usarse para decidir qué apósito usar junto con la terapia de V.A.C. VERAFLU™

	Apósitos V.A.C. VERAFLU™	Apósito grande V.A.C. VERAFLU™	Apósito V.A.C. VERAFLU CLEANSE™	Apósito V.A.C. VERAFLU CLEANSE CHOICE™
<b>Tipos de heridas</b>				
<b>Características de la herida</b>	Heridas abiertas, incluidas heridas con zonas socavadas poco profundas o de túnel, donde es visible el aspecto distal	Heridas abiertas de gran tamaño, incluidas heridas con zonas socavadas poco profundas o de túnel, donde es visible el aspecto distal	Heridas con cavidad o con formas complejas	Heridas con exudado fibrinoso espeso, esfacelos, material infeccioso y otra carga microbiana de la herida
<b>Propósitos fundamentales de la terapia</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se utiliza conjuntamente con la terapia V.A.C. VERAFLU™ facilitar la eliminación de material infeccioso y otra carga microbiana de la herida.</li> <li>• Generación de tejido de granulación firme</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se utiliza conjuntamente con la terapia V.A.C. VERAFLU™ facilitar la eliminación de material infeccioso y otra carga microbiana de la herida.</li> <li>• Generación de tejido de granulación firme en heridas grandes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se utiliza conjuntamente con la terapia V.A.C. VERAFLU™, iniciar la terapia activa y facilitar la eliminación de material infeccioso y otra carga microbiana de la herida.</li> <li>• Fácil aplicación en túneles y socavaciones</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se utiliza conjuntamente con la terapia V.A.C. VERAFLU™, iniciar la terapia activa y facilitar la eliminación de material infeccioso como exudado fibrinoso espeso, esfacelos y otra carga microbiana de la herida.</li> <li>• Sujeta a evaluación clínica, esta combinación se puede considerar cuando el desbridamiento quirúrgico no es posible o no es adecuado</li> </ul>

	Apósitos V.A.C. VERAFLU™	Apósito grande V.A.C. VERAFLU™	Apósito V.A.C. VERAFLU CLEANSE™	Apósito V.A.C. VERAFLU CLEANSE CHOICE™
<b>Forma</b>				
<b>Características de aplicación</b>	<p>Espuma de corte espiral</p> <p>Fácil aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tamaño adaptable sin necesidad de tijeras</li> <li>Zona precortada para la aplicación de la almohadilla al usarla para crear puentes</li> <li>Aplicación de una única almohadilla</li> </ul>	<p>Bloque de espuma precortado en dos capas</p> <p>Fácil aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para superficies grandes con profundidad superficial</li> <li>Se suministra con el set de tubos V.A.C. VERAT.R.A.C. DUO™ para la cobertura de una superficie mayor</li> </ul>	<p>Forma tubular</p> <p>Flexibilidad en la aplicación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ideal para tratar las heridas de forma compleja (por ejemplo, túneles, aplicaciones circunferenciales y socavaciones)</li> <li>Aplicación de una única almohadilla</li> </ul>	<p>Bloque de espuma precortado en tres capas</p> <p>Fácil aplicación con flexibilidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capas delgadas para una mejor adaptabilidad</li> <li>Las múltiples capas proporcionan distintas opciones de aplicación para las heridas con diferentes profundidades</li> <li>Ideal para las heridas sucias que necesitan un tratamiento activo</li> <li>Aplicación de una única almohadilla</li> </ul>
<b>Características del apósito</b>	<p><b>Pequeño:</b> 7,7 × 11,2 × 1,75cm por pieza (espiral de 2 piezas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada pieza mide 24cm desenrollada</li> <li>Cada pieza crea un puente de 18cm</li> </ul> <p>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 12-80ml (1 pieza); 26-160ml (2 piezas)</p> <p><b>Mediano:</b> 14,7 × 17,4 × 1,75 cm por pieza (espiral de 2 piezas)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada pieza mide 80cm desenrollada</li> <li>Cada pieza crea un puente de 74cm</li> </ul> <p>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 38-240ml (1 pieza); 80-450ml (2 piezas)</p>	<p>25,0 × 15,0 × 1,6cm por pieza (ovalada - 2 piezas)</p> <p>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 55-350ml (1 pieza); 110-500ml (2 piezas)</p>	<p>1 cada varilla de espiral (barra de 24"; 1,25" de diámetro)</p> <p>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 65-130ml (1/2 barra); 130-250ml (barra completa)</p>	<p>18,0cm × 12,5cm × diferentes espesores (0,8cm – 3,2cm)</p> <p><b>3 capas</b></p> <p><b>Capa de cubierta de 1,6cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 85-160ml</li> </ul> <p><b>Capa de cubierta de 0,8cm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 42-80ml</li> </ul> <p><b>Capa de contacto de 0,8cm</b> (orificios circulares de 1,0cm, espacio de 0,5cm)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Rango del punto establecido de ayuda de llenado: 24-46ml</li> </ul>

**NOTA:** existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad para los productos y terapias de KCI. Por favor, consulte a un médico y las instrucciones de uso antes de la aplicación.